

# PHILIPS



IPL plaukelių šalinimo  
prietaisas su „SenseIQ“

Lumea IPL 9900 Series

„SmartSkin“ jutiklis

3 išmanūs priedai: kūnui, veidui,  
bikinio sričiai, tiksliam  
koregavimui

Išskirtinės DI valdomos  
programos funkcijos

Naudojamas be laido ir su laidu



BRI953/02

## Mūsų protingiausias IPL su išskirtinėmis „Skin AI“ funkcijomis

18 mėn. mėgausitės glotnia oda be plaukelių\*

Atraskite mūsų išmaniausią IPL sprendimą ilgai išliekančiai lygiai odai. Mūsų greičiausias akumuliatorinis „Lumea IPL“ įrenginys su „SenseIQ“ technologija dabar turi išskirtines „Skin AI“ funkcijas „Lumea IPL“ programėlėje, kad galėtumėte analizuoti savo odą ir stebėti pažangą.

### Švelnus ir veiksmingas ilgai išliekančiai lygiai odai

- Norėdami gauti greitų rezultatų, gydykite tik 2 kartus per mėnesį
- Kad būtų patogiau, galima naudoti su laidu ir be jo
- Sukurta kartu su dermatologais, kad būtų lengva ir veiksminga

### Visapusiškas sprendimas veidui ir kūnui

- Visapusiškas sprendimas veidui ir kūnui su 3 išmaniaisiais priedais
- Tinka daugumai odos ir plaukų atspalvių

### Individuali IPL plaukų šalinimo procedūra

- Švelnus ir patogus su „SenseIQ“
- Išmanoji kūno plaukų analizė su „SkinAI“


## Lumea IPL 9900 Series

IPL plaukelių šalinimo prietaisas su „SenseIQ“

BRI953/02

# Ypatybės

**Norėdami gauti greitų rezultatų, naudokite 2 kartus per mėnesį**

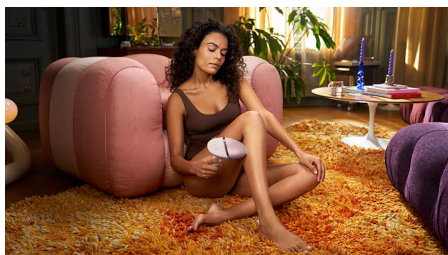


Iš pradžių kas dvi savaites – tai perpus mažiau procedūrų nei kitų prekių ženklų. Po to atliekami pataisymai vos kartą per mėnesį. Viskas. Abiejų blauzdų procedūros trunka 8,5 min.

### „SenseIQ“ technologija



„Lumea 9900“ serija turi penkis lengvai reguliuojamus šviesos nustatymus. Mūsų „SmartSkin“ jutiklis nuskaitys jūsų odos atspalvį ir padeda rasti patogiausią nustatymą. Išmanieji priedai pritaiko procedūrą kiekvienai kūno vietai.

### For convenience with corded and cordless options

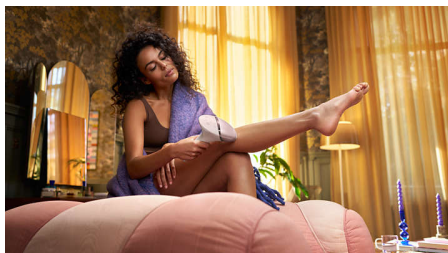

„Philips Lumea“ sukurtas taip, kad jį naudoti būtų patogiu ir lengva. Naudokite prietaisą su laidu, kad greitai atliktumėte procedūras didelėse kūno

srityse, pvz., kojų, arba atjunkite laidą ir naudokite baterijos režimą, kad tiksliai atliktumėte procedūras sunkiai pasiekiamose kūno srityse.

### 3 išmanieji priedai




Specialiai sukurti priedai puikiai prilimpa prie kūno linknių ir sujungti paleidžia efektyviausias programas kiekvienai kūno sričiai. Veidas: plokščia konstrukcija ir mažas langelis su UV filtru. Kūnas: išlenktas į vidų su dideliu langeliu. Tikslumas: išlenktas į išorę sunkiai pasiekiamoms vietoms.

### Sukurta padedant dermatologams



Būdama sveikatos technologijų lyderė ir konsultuodamasi su dermatologais, „Philips“ sukūrė „Lumea IPL“, kad būtų lengva ir veiksminga saugiai naudoti jūsų namuose. Profesionaliuose salonuose naudojamos technologijos sukurtas „Lumea IPL“ siūlo švelnų gydymą net jautriose vietose.

### Išskirtinės „SkinAI“ funkcijos

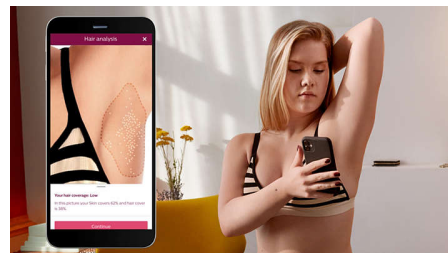

Mūsų nemokama instruktavimo programėlė siūlo nuoseklias gaires dabar su išskirtine „SkinAI“ technologija, skirta analizuoti jūsų kūno plaukus ir stebėti plaukų šalinimą.

### Daugeliui odos ir plaukų tipų



IPL reikia kontrasto tarp plaukų spalvos pigmento ir odos tono pigmento, todėl veikia natūraliai tamsiai šviesiais, rudais ir juodais plaukais bei odos atspalviais nuo šviesaus iki tamsaus (I–V).

# Specifikacijos

### Techninės priedų specifikacijos

**Priedas kūno procedūroms:** Forma: išgaubtas, Langelio dydis: 4,1 cm<sup>2</sup>, Kūnui pritaikyta procedūra: kojoms, rankoms ir pilvui

**Priedas veido procedūroms:** Forma: plokščias, Langelio dydis: 2 cm<sup>2</sup>, papildomas filtras, Veidui pritaikyta procedūra: viršutinei lūpai, smakrui ir žandikauliui

**Priedas preciziškoms procedūroms:** Forma: įgaubtas, Langelio dydis: 3 cm<sup>2</sup>, Bikinio plotui ir pažastims pritaikyta procedūra

### Saugūs ir reguliuojami nustatymai

**Integruotas UV filtras:** Apsaugo odą nuo UV spindulių

**5 šviesos energijos nustatymai:** Pritaikoma prie jūsų odos tipo

**Integruota saugumo sistema:** Apsaugo nuo netyčinių blyksnių

**Odos atspalvio jutiklis:** Nustato jūsų odos atspalvį

**„SmartSkin“ jutiklis:** Tinkamo nustatymo indikacija pagal pareikalavimą

### Naudojimo režimas

**Slinkimo ir blyksnių režimas:** Greitam naudojimui

**Perkėlimo ir blyksnių režimas:** Procedūroms mažame plote

**Naudojamas su laidu ir be laido:** Naudojamas be laido ir su laidu

### Techniniai duomenys

**Įtampa:** 100–240 V

**Baterijos tipas:** Įkraunama baterija

**Aukštų charakteristikų lempa:** Sukurtas taip, kad tarnautų, 450 000 blyksnių, atitinkančių 39 lempos tarnavimo metus\*\*

### Techninė priežiūra

**Garantija:** 2 metų pasaulinė garantija ir 1 metų papildoma garantija užregistravus gaminį internetu per 90 dienų

### Pridėti priedai

**Naudojimo instrukcijos:** Vartotojo vadovas

**Laikymas:** Prabangus krepšys

**Adapteris:** 19,5 V / 4000 mA

### Procedūros laikas

**Apatinė kojos dalis:** 8,5 min.

**Pažastys:** 2,5 min.

**Bikinio linija:** 2 min.

**Veido sritys:** 1,5 min.

