

PHILIPS

AVENT

Aparat 2 în 1: Încălzitor
și sterilizator

Premium

Încălzire delicată, fără zone
fierbinți

Sterilizare fără substanțe chimice

Configurare rapidă și ușoară

Compatibil cu majoritatea
articolelor esențiale



SCF359/00



O rutină simplă, de la o hrănire la alta

Încălzire și sterilizare rapide și sigure. De fiecare dată.

Cel mai de încredere mod de a încălzi și steriliza te menține cu un pas înainte. Încălzirea în baie de apă, similară celei folosite în spitale, conservă mai bine proteinele din lapte, în timp ce senzorul inteligent previne supraîncălzirea. Iar când totul trebuie curățat? Aburul natural elimină 99,9 % din germeni.

Efficient, sigur și rapid

- Încălzește biberoanele în 3 minute, la o apăsare de buton*
- Elimină în siguranță 99,9% din bacterii folosind abur natural

Încălzire în baie de apă, similară celei din spitale

- Folosește o metodă de încălzire cu baie de apă, similară celei din spitale
- Circularea constantă a laptelui previne apariția zonelor fierbinți.

Fără presupuneri. Fără supraîncălzire.

- Senzorul inteligent previne supraîncălzirea
- Se oprește automat și păstrează la cald

Compatibilitate universală

- Compatibil cu majoritatea biberoanelor și recipientelor de hrană pentru bebeluși
- Folosește la maximum produsele esențiale din rutina zilnică a bebelușului tău.

Design intuitiv

- Încălzește și sterilizează cu un singur buton intuitiv

Repere

Încălzește în 3 minute*



E ora mesei? Încălzirea în baie de apă, similară celei folosite în spitale, păstrează mai bine nutrienții din lapte, fără a compromite eficiența. Indiferent dacă hrănești tu sau altcineva bebelușul, cea mai performantă tehnologie de încălzire garantează că totul este pregătit în 3 minute.*

Elimină 99,9% dintre bacterii



Când este timpul pentru curățare, folosește puterea aburului natural pentru a elimina 99,9% din bacterii. Aburul, datorită capacității lui de a pătrunde în zone greu accesibile, este ideal pentru a steriliza fiecare colț al biberoanelor, suzetelor și jucăriilor mici ale bebelușului. Și totul – fără substanțe chimice.

Conservă mai bine proteinele din lapte



Încălzește laptele așa cum o fac asistentele în spital, folosind încălzirea în baie de apă. Comparativ cu alte metode, conservă mai bine proteinele din lapte esențiale pentru a dezvolta sistemul imunitar al bebelușului. Delicată și rapidă, tehnologia noastră susține dezvoltarea sănătoasă a bebelușului, cu fiecare masă.

Previne încălzirea neuniformă




Tehnologia noastră de încălzire protejează proteinele care susțin dezvoltarea sănătoasă a bebelușului distribuind căldura uniform și constant. Datorită încălzirii în baie de apă, nu mai ai de ce să-ți faci griji pentru zonele fierbinți care pot face laptele să se strice. Astfel, bebelușul se poate bucura de lapte încălzit uniform și bogat în nutrienți - de fiecare dată.

Previne încălzirea neuniformă



Indiferent care este temperatura inițială a laptelui, senzorul nostru inteligent se ocupă de detalii în locul tău. Acesta detectează temperatura de pornire și ajustează automat timpul de încălzire. Fără presupuneri. Fără riscul de supraîncălzire.

Oprire automată și păstrare la cald

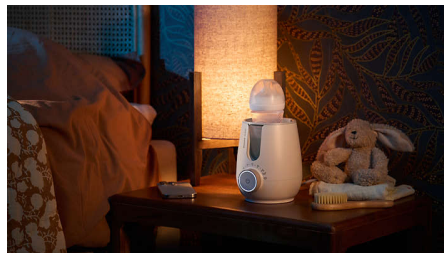

Nu mai este nevoie să faci presupuneri. Hrănirile de zi și de noapte devin mai simple și mai sigure, știind că aparatul se oprește automat la final și menține biberonul la temperatura potrivită până la 60 de minute.

Un buton controlează totul



Indiferent că încălzești pentru prima dată sau ești deja expert(ă) în pregătirea mesei, interfața noastră cu un singur buton face totul simplu pentru orice persoană care are grijă de bebeluș. Primești alerte vizuale și sonore pe tot parcursul fiecărui proces, înainte ca aparatul să se oprească automat.

Fereastră transparentă



Noua noastră fereastră transparentă face pregătirea pentru hrănire este intuitivă pentru oricine. Poți verifica rapid nivelul apei înainte de încălzire și te asiguri că totul este exact cum trebuie. Fără presupuneri - tot ce trebuie să știi este chiar în fața ta.

Design compact, pentru mai mult spațiu liber



Păstrează-ți casa ordonată cu un singur aparat multifuncțional care ocupă foarte puțin spațiu pe blat. Designul său compact, dar eficient, îți permite să sterilizezi un biberon, jucării mici și suzete în același timp.

Premium

Aparat 2 în 1: Încălzitor și sterilizator

SCF359/00

Repere

Ușor de curățat



Designul nostru simplu și practic face curățarea la fel de ușoară ca încălzirea și sterilizarea. Șterge aparatul cu o lavetă. fDeschiderea largă a cuvei permite acces facil la interior, pentru o curățare rapidă și eficientă. Accesoriul de sterilizare poate fi pus și în mașina de spălat vase, dacă este nevoie.

Compatibil cu majoritatea mărcilor



Pe măsură ce micuțul tău crește, poți folosi în continuare încălzitorul nostru cu diferite tipuri de biberoane, indiferent de marcă, material sau dimensiune. Iar când cel mic este gata să treacă la următoarea etapă, încălzitorul nostru este potrivit și pentru recipientele de mâncare.

Valorifică la maxim produsele esențiale



Tehnologia noastră de sterilizare cu abur este cea mai sigură metodă de igienizare a articolelor bebelușului. Este eficientă asupra microbilor, fiind totodată delicată cu diverse tipuri de materiale, ceea ce prelungeste durata de viață a obiectelor. Folosind accesoriului de sterilizare pentru articolele mici, este ușor să sterilizezi biberoane, suzete, componente și jucării mici în același timp.

Premium

Aparat 2 în 1: Încălzitor și sterilizator

SCF359/00

Specificații

Material produs

Material produs: Plastic (PP și ABS)

Specificații tehnice

Consum de energie: 400 W
Tensiune (S_0000156): 220-240 V ~ 50-60 Hz,
120-127 V ~ 50-60 Hz (US, Canada, Mexic)

Greutate și dimensiuni

Greutate: 1000 g
Dimensiuni produs (l x H x A): 260,4 x 150 x
210,5 mm

Țara de origine

Fabricat în: China

Include

Încălzitor și sterilizator 2 în 1: 1 buc.

Articol comercial de consum

Height: 103.6 cm
Width: 21.5 cm
Length: 15 cm
Net weight: 0.74 kg
Gross weight: 1.036 kg
GTIN: 8720689046138
Country of origin: CN

Carton exterior

Height: 47.6 cm
Width: 28.2 cm
Length: 46.2 cm

Net weight: 6.21 kg
Gross weight: 6.65 kg
GTIN: 18720689046135

Pallet Layer

Height: 47.6 cm
Width: 100 cm
Length: 120 cm

Palet

Height: 196.8 cm
Width: 100 cm
Length: 120 cm
Net weight: 142.08 kg
Gross weight: 227.8 kg
GTIN: 68720689046130



* 150 ml/5 oz de lapte la temperatura camerei în biberon
Avent Natural de 9 oz.