

PHILIPS



マスク及びCPAP付属品の使い方

コンフォートジェルブルーネーザルマスク
ComfortGel Blue

- ※ 本書は取扱説明書に代わるものではありません。必ず添付文書および取扱説明書をご覧ください。
- ※ フィルタの交換・取り付けはご使用の機器を確認し、裏面の「5.フィルタの取り付け方法」の項を参照しながら行ってください。
- ※ ご不明な点がございましたら、最終ページのお客さまコールセンターまでお問い合わせください。

マスク装着方法の動画を公開しています

スマートフォン・タブレットから
各端末から右記の二次元コードを
読み取り動画へ



パソコンから


フィリップス

検索

philips.co.jp のトップページ上部メニューにある「健康」を開き「患者さま向け機器取り扱い資料」の下方にある「マスク」をクリック

各部品の名称

*呼気ポートは塞がないでください。

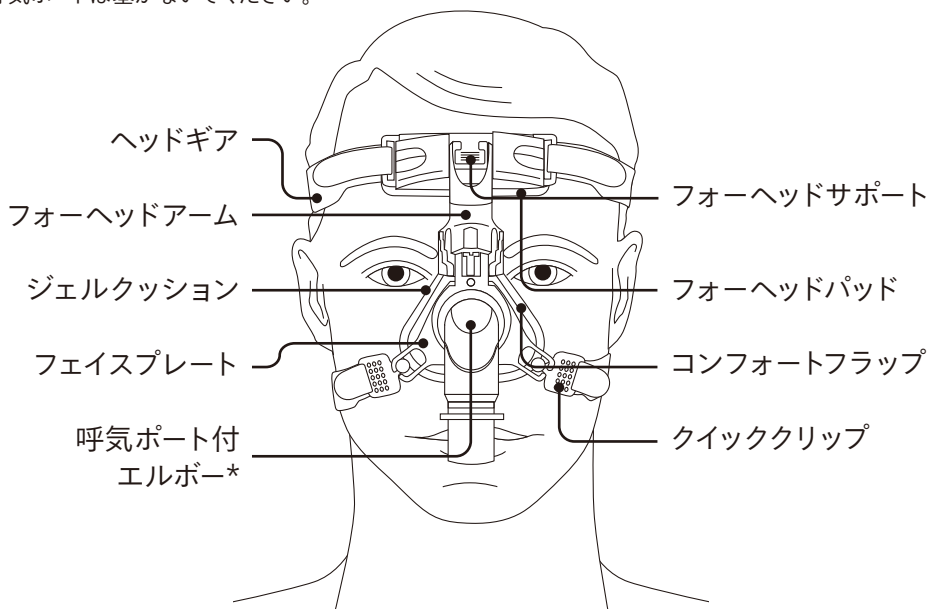


正しい装着図

1 マスク装着の手順(1)


あらかじめヘッドギアを適当な長さに調整しておきます。

ヘッドギア下部の、片方または両方のクイッククリップをはずしておきます。マスクを鼻にあて、ヘッドギアを頭上からかぶります。

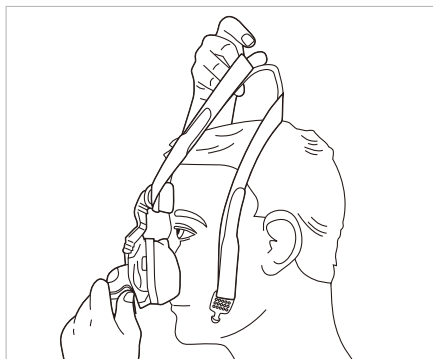


1 マスク装着の手順 (2)

ヘッドギアの上部ストラップと下部ストラップを左右均等に、締めすぎないように注意しながら調整します。


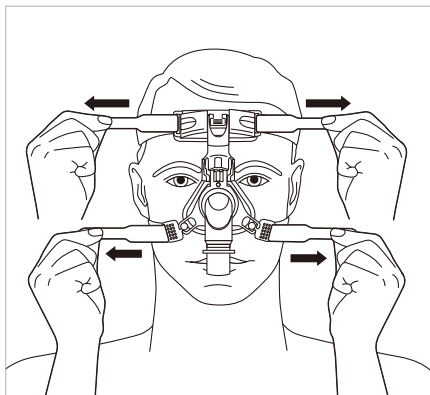


フォーヘッドアームの両脇を押してフォーヘッドサポートを上下にスライドさせ、位置を調整します。

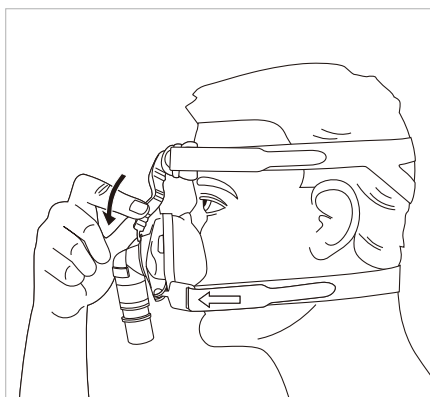

マスクを取り外す際は、クッション部分を手で押さえながらヘッドギアを前方にずらして取り外します。

※クッション部分を持ちあげながら取り外さないでください。

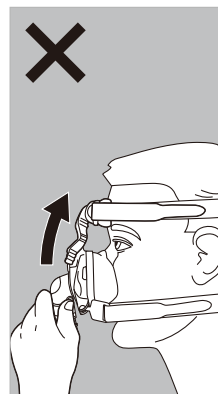
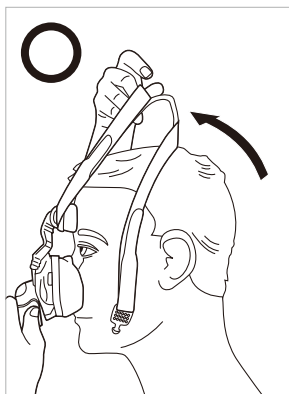


2 トラブルと対処法

マスクが頬に食い込んでいる場合

ヘッドギアを締めすぎていませんか？



特に下部のヘッドギアは頬との間に指が1本入る程度に緩めます。

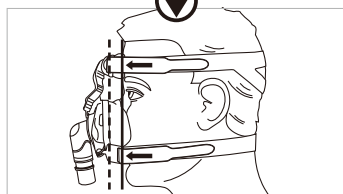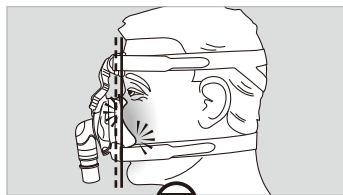

目の周辺に空気漏れがある場合

マスクが顔と平行になっていますか？



フォーヘッドアームの両脇を押して
フォーヘッドサポートを下にスライドさせ、
位置を調整します。

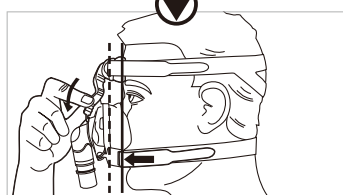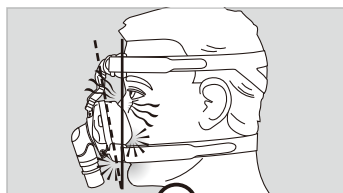

口元周辺に空気漏れがある場合





マスクが顔と平行になっていますか？

フォーヘッドアームの両脇を押して
フォーヘッドサポートを上スライドさせ、
位置を調整します。

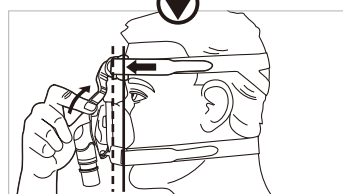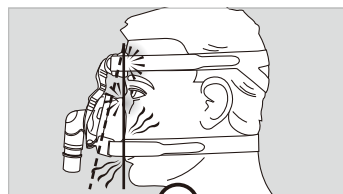

3

マスクの分解／組み立て

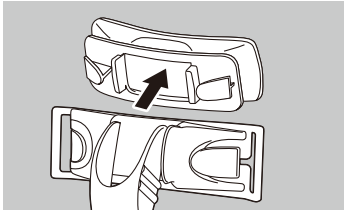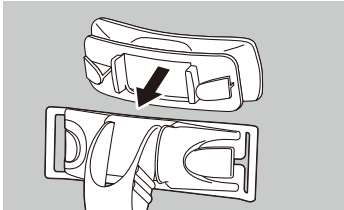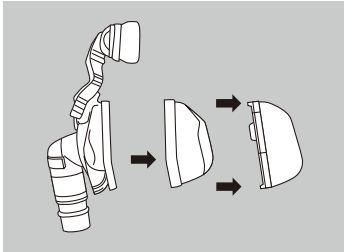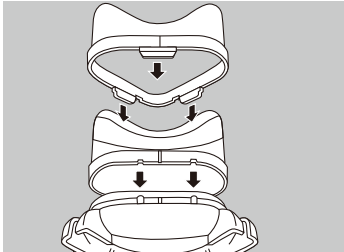部品名	分 解	組み立て
ヘッドギア	フォーヘッドサポートとクイッククリップから外します。	上部ストラップをフォーヘッドブラケットに通し、下部ストラップをクイッククリップに留めます。
フォーヘッドパッド	フォーヘッドサポートのスリットからフォーヘッドパッドをスライドさせて取り外します。 	フォーヘッドパッドをフォーヘッドサポートのスリットにスライドさせ、取り付けます。 
マスククッション	フェイスプレートからコンフォートフラップを取り外し、ジェルクッションを取り外します。 	フェイスプレートのふちに合わせジェルクッションを取り付け、コンフォートフラップを上からかぶせます。 

4

付属品のお手入れ方法

(呼吸回路、水タンク、花粉フィルタはマスクの付属品ではありません)

頻度	付属品名	洗浄方法・交換
毎日	マスク 	各部品を分解し、中性洗剤を薄めたぬるま湯で洗浄します。よくすすぎ、風通しの良い所で陰干しします。
	呼吸回路 	中性洗剤をうすめたぬるま湯で、洗います。よくすすぎ、風通しの良い所で陰干しします。
1週間	水タンク+ 水タンク用 パッキン 	中性洗剤をうすめたぬるま湯で洗浄し、きれいな水ですすぎます。乾いた布などで水気を拭き取り陰干しします。
	ヘッドギア 	マスクからはずして中性洗剤をうすめたぬるま湯にひたし、5分間おきます。
1ヶ月	花粉フィルタ 	必ず乾いた花粉フィルタと交換します。使用後は中性洗剤をうすめたぬるま湯で洗浄し、きれいな水でよくすすいだあと風通しのよい所で陰干しします。




注意

付属品（マスク・回路など）の

お手入れをする際は、以下のことをお守りください。


- ・ベンジン、アルコール、塩素系洗剤は使用しない。
- ・日当りの良い場所で干さない。

5 フィルタの取り付け方法

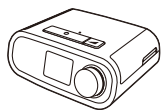

ドリーム
ステーション

古いフィルタを取り除きます。
新しいフィルタに交換する際は
右図の順でセットします。

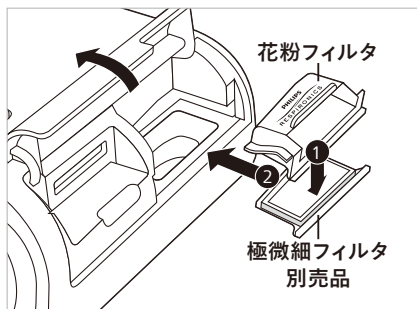

ドリームステーションの取り扱い方法を解説した動画を公開しています

スマートフォン・タブレットから
各端末から右記の二次元コードを
読み取り動画へアクセス



パソコンから

philips.co.jp のトップページ上部メニューにある「健康」
を開き「患者さま向け機器取り扱い資料」の下にある
「DreamFamily」をクリック

販売名: ドリームステーション Auto
販売名: ドリームステーション Pro
販売名: ドリームステーション BiPAP Auto

製造販売承認番号: 30200BZX00299000
製造販売承認番号: 22800BZX00314000
製造販売承認番号: 22800BZX00348000



CPAPお客様コールセンター

よるは よいこきゅう
0120-48-4159

受付時間 7:00～22:00 年中無休 365日対応

製造販売業者

株式会社フィリップス・ジャパン

〒106-0041 東京都港区麻布台1-3-1

麻布台ヒルズ森JPタワー15階

www.philips.co.jp/healthcare

睡眠・呼吸製品のお問い合わせは地域の事業所まで

※各事業所の連絡先は以下のURLで公開しています

www.philips.co.jp/SRC-Office

販売名：コンフォートジェルブルー ネーザルマスク

製造販売届出番号：13B1X00221000090

一般医療機器

改良などの理由により予告なしに意匠、仕様の一部を変更することがあります。あらかじめご了承ください。詳しくは担当営業、もしくはお近くの事業所までお問い合わせください。記載されている製品名などの固有名詞は、Koninklijke Philips N.V.またはその他の会社の商標または登録商標です。

© 2017 Koninklijke Philips N.V. PN 1079087/250520 R19-FK

