

PHILIPS

sonicare



Szájzuhany

Cordless Power Flosser 3000

Quad Stream technológia

Impulzushullámok vezetnek menet közben



HX3826/24

A QuadStream technológiával újragondolt fogköztisztítás

A kezelt területeken található lepedék* 99,9%-át eltávolítja

Erőfeszítés nélküli alapos fogköztisztítás a fogíny egészségének javítása érdekében. Az egyedülálló Quad Stream hegy kevesebb erőfeszítéssel több területet tisztít meg, így mindig hatékonyabb a fogköztisztítás. A megfelelő használat pedig egyszerűen kivitelezhető.

Egyszerű és kényelmes

- Egyszerűen feltölthető 250 ml-es tartály
- Gyors, univerzális töltés USB-A-kis dugós kábellel
- Egyszerű technika
- Normál hegy célzott tisztításhoz

Gyorsabb, hatékonyabb fogköztisztítás

- Teljes tisztítás 60 másodperc alatt
- 2 fogköztisztító üzemmód, 3 intenzitási szint
- A Pulse Wave technológia fogról fogra vezeti a felhasználót
- Quad Stream technológia a gyorsabb, hatékonyabb fogköztisztításért

An effortless clean with advanced technology

- Quadstream technológia: eltávolítja a lepedéket az ínyvonal alól

Fénypontok

Quad Stream technológia



Az egyedülálló X-alakú Quad Stream hegy a vízáramot 4 vízsugárba választja szét, amelyek több területet fednek le a fogak között és a fogíny mentén. Gyorsabb, alaposabb tisztítás a hagyományos fogselyemmel való bajlódás nélkül.

Tisztítja az ínyvonal alatti részt



A Quadstream technológia a lepedék akár 99%-át eltávolítja a 6 mm mély periodontális tasakokból.

Pulse Wave technológia



Gyengéd vízsugarimpulzus vezet a felhasznált fogról fogra a Deep Clean (Mélytisztítás) üzemmódban – így minden alkalommal megfelelő módon végezheti a tisztítást.

2 üzemmód, 3 intenzitási szint



Válassza a mosolyához illő tisztaságot. A Clean (Tisztítás) üzemmód folyamatos vízáramlást biztosít a hatékony mindennapos tisztításhoz. A Deep Clean (Mélytisztítás) üzemmód impulzusokat alkalmaz az alaposabb tisztítás érdekében. Az állítható intenzitási szint biztosítja a kényelmet.

Teljes tisztítás 60 másodperc alatt




A nehezen elérhető területeket is megtisztíthatja a 360 fokban elforgatható fejjel, vagyis bármilyen irányban használhatja a készüléket. Alapos, 360 fokalos tisztítás mindössze 60 másodperc alatt az elejétől a végéig.

Gyors töltés az USB-A-kis dugós kábellel




Kényelmes töltés az USB-A-kis dugós kábel segítségével. Egy feltöltéssel akár 14 napig is fogat moshat.

250 ml-es tartály

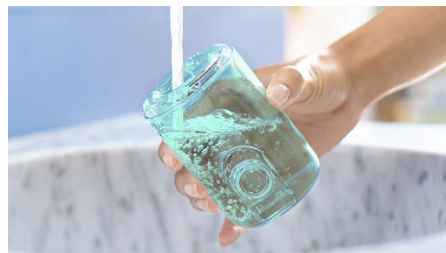


A 250 ml-es tartály elegendő vizet képes tárolni az ajánlott 60 másodperces tisztításhoz. Az egyszerű újratöltéshez egyszerűen csavarja el és vegye le, vagy használja az oldalsó betöltőnyílást.

Egyszerű technika

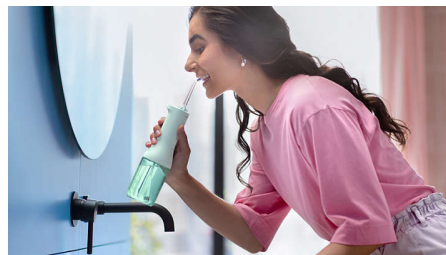

A hatékonyabb fogköztisztításhoz egyszerűen csak irányítsa a megfelelő helyre, nyomja meg, és indul is a tisztítás. Irányítsa a hegyet a fogak közé és a fogíny vonalára, és hagyja, hogy a többit a készülék végezze el!

Normál hegy célzott tisztításhoz

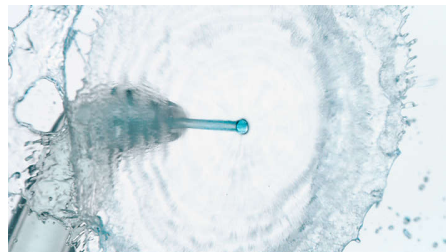

A normál, egyetlen vízsugarat kibocsátó hegy növeli a nyomást a célzott tisztításhoz és az ételmaradványok eltávolításához, amikor szükséges.

Műszaki adatok

Tápellátás

Feszültség: Többfeszültségű töltő

Formatervezés és kidolgozás

Szín: Menta

Szerviz

Jótállás: 2 év korlátozott garancia

Egyszerű használat

Markolat: Vékony, ergonomikus kialakítás

Fúvócső: Egyszerűen fel- és lepatintható

Teljesítmény

Tisztítás: A teljes száj megtisztítása 60–90 másodperc alatt

Tartozékok

Vez. nélk. elektromos fogköztisztító: 1

F1 Standard fej: 1

F3 Quad Stream fej: 1

USB töltőkábel: 1

USB fali adapter: 1

Módok

Clean: Az alapos mindennapos tisztaságért

Deep Clean: A fogközők mély tisztításáért

Intenzitási szintek: 3

Egészségügyi előnyök

Lepedék eltávolítás: A kezelt területeken található lepedék 99%-át eltávolítja*

Íny alatti: Bizonyítottan eltávolítja a lepedék akár 99%-át az ínyvonal alól**

Consumer Trade Item

Height: 24.7 cm

Width: 13.4 cm

Length: 9.2 cm

Net weight: 0.412 kg

Gross weight: 0.63 kg

GTIN: 8720689047630

Country of origin: CN

Harmonized system code: 96032100

Külső karton

Height: 27.2 cm

Width: 15.1 cm

Length: 29.9 cm

Net weight: 1.236 kg

Gross weight: 2.19 kg

GTIN: 18720689047637

Pallet Layer

Height: 27.2 cm

Width: 100 cm

Length: 120 cm

Raklap

Height: 96.6 cm

Width: 100 cm

Length: 120 cm

Net weight: 74.16 kg

Gross weight: 156.66 kg

GTIN: 68720689047632

