

PHILIPS

AVENT



Extractor de leche
eléctrico doble

Hands-free

Imita el ritmo de ingesta del bebé

Libertad al extraer leche

Fácil de usar, limpiar y armar

Ajuste perfecto e inclusivo



SCF532/11

Gane libertad y tiempo.

Imita el ritmo de ingesta del bebé

El extractor de leche eléctrico doble manos libres de Philips AVENT está diseñado para una extracción de alto rendimiento* y cómoda. Imita el ritmo de su bebé y, gracias a su potencia, suavidad y ligereza, es su compañero ideal de extracción manos libres.

Libertad corporal durante la extracción

- Muévase con libertad gracias a los recipientes de recolección ultralivianos
- Comodidad portátil para maximizar sus movimientos

Imita el ritmo de ingesta del bebé

- Extraiga leche con eficacia* siguiendo un ritmo que imita el de su bebé
- Extracción silenciosa y de grado hospitalario

Fácil de usar, fácil de limpiar y fácil de armar

- Fácil de limpiar y armar con pocas piezas.
- Realice un seguimiento del flujo de leche con los recipientes de recolección que son completamente transparentes
- Personalice su sesión de extracción

Ajuste perfecto e inclusivo

- Los protectores de silicona siguen suavemente la forma de sus pechos
- Variedad de tamaños en protectores mamarios e insertos para cada mamá

Hands-free

Extractor de leche eléctrico doble

SCF532/11

Destacados

Imita el ritmo de ingesta del bebé



Los bebés saben cómo alimentarse de la mejor manera. Es por eso que nuestro extractor de leche eléctrico de manos libres imita su ritmo natural de ingesta, para que usted pueda encontrar su propio ritmo y disfrutar de una extracción eficaz* y óptima de leche. El extractor manos libres Philips Avent bombea hasta 85 veces por minuto, por lo que es dos veces más rápido que la mayoría de los extractores de leche**.

Motor de grado hospitalario




La unidad motora proporciona la potencia de grado hospitalario que espera de un extractor de leche tradicional, pero con un formato compacto y portátil. Gracias a su batería recargable, la unidad motora inalámbrica extrae leche de manera potente y discreta en cualquier lugar.

Protectores únicos SkinSense



Nuestros exclusivos protectores mamarios de silicona SkinSense están diseñados para brindar la máxima comodidad y seguir con suavidad la forma de las mamas mediante la calidez natural del cuerpo. Los protectores mamarios están fabricados con silicona apta para alimentos, lo que brinda una tranquilidad absoluta.

Recolección transparente

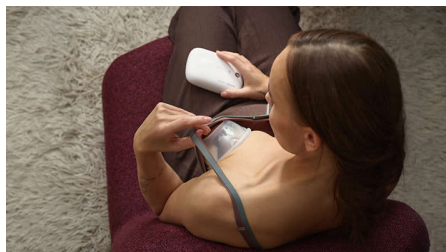

Los recipientes de recolección transparentes proporcionan una visión clara del interior. Con ellos, podrá colocar correctamente sus pezones para extraer leche de la mejor manera y llevar un control visual de la cantidad extraída. Brinda un uso seguro desde la primera gota hasta el final.

Vaso de recolección ultraliviano



Un recipiente de recolección pesa solo un poco más de 100 gramos cuando está vacío: es hasta tres veces más ligero que un extractor de leche totalmente portátil. Los recipientes se acomodan fácilmente dentro del sujetador, por lo que casi no notará que los lleva puestos.

Úselo a su manera



Nuestro extractor cuenta con una correa de transporte trenzada y un clip para ropa con el que podrá usar la unidad motora cruzada al cuerpo o ajustada a la cintura. Con la libertad de usarlo a su manera, no tendrá preocupaciones, ya que usted lleva el control. Utilice el acoplador de tubo y el regulador de correa para ajustar el extractor con precisión.


Hands-free

Extractor de leche eléctrico doble

SCF532/11

Destacados

Extracción personalizada

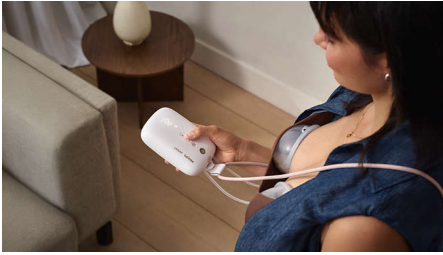

Aproveche al máximo cada sesión con 8 niveles de succión para estimular el flujo de leche y 16 niveles de succión para extraerla. Puede ajustar el formato de extracción y el dispositivo lo almacenará automáticamente para que la configuración ideal siempre esté lista para usar.

Fácil de limpiar y de armar



Diseñamos nuestra bomba y accesorios para que sean lo más simples posible. Con solo unas pocas piezas de conexión, cada vaso de recolección es fácil de desmontar, limpiar (a mano o en un lavaplatos), desinfectar y volver a ensamblar.

Encuentre el tamaño adecuado



Apoyamos a todas las mamás para que se sientan lo mejor posible, y que disfruten del ajuste adecuado es una parte esencial de nuestro propósito. Nuestra gama de tamaños de protectores mamarios e insertos de protección se adapta al 99 % de las madres. Están disponibles para comprarlos por separado, con el fin de que puedan disfrutar de la máxima comodidad mientras extraen leche.

Especificaciones

Potencia eléctrica

Origen: Batería recargable/USB-C (adaptador no incluido)

Material

Vaso, tapa frontal, cubierta del protector mamario: Polipropileno

Protector mamario, membrana, válvula, inserto:

Silicona líquida

Tubo de silicona: Silicona

Qué se incluye

Cable USB-C: 1 pieza

Correa de transporte: 1 pieza

Acoplador de tubo: 1 pieza

Unidad motora recargable (con clip extraíble):

1 pieza

Vaso de recolección (montado): 2 piezas

Tubos de silicona: 2 piezas

Cubierta (para polvo) del protector mamario:

2 piezas

Protector mamario (21 mm, 24 mm): 2 piezas

cada una

Ficha de medidas para el tamaño de la tetina:

1 pieza

Inserto de 19 mm: 2 piezas

Facilidad de uso

Uso del extractor de leche: Fácil de usar, fácil de limpiar y fácil de armar

Funciones

Flexibilidad de movimiento: Extracción manos libres

Ajustes de personalización: 16 niveles de succión en el modo de extracción, 8 niveles de succión en el modo de estimulación

Unidad motora: Batería recargable/USB-C, Cargar por completo la batería lleva hasta 1,5 horas y dura aproximadamente 5 sesiones de extracción

Protector mamario y especificaciones de inserto: Varios tamaños disponibles para ofrecer el mejor ajuste

