

PHILIPS

sonicare



Ladattava
sähköhammasharja

4100

Poistaa hellävaraisesti 5 kertaa
enemmän plakkia

Paineanturi

4 harjausasetusta

Easy-start



HX4042/46

Perushoitoa terveille hampaille ja ikenille

Poistaa hellävaraisesti jopa 5 kertaa enemmän plakkia*

Vaihda helposti sähköhammasharjaan Philips Sonicare 4000 Series -mallin avulla. Poistaa jopa 5 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja.

Vaivattomampaa hampaiden harjausta

- Helppo vaihto sähköiseen harjaukseen
- Valitse juuri sinulle sopiva harjauskokemus
- Ohjattua harjausta

Suunniteltu omaan elämäntyyliisi

- 21 päivän akunkesto

Tunne puhtaus, jonka vain Sonicare voi tarjota

- Poistaa hellävaraisesti jopa 5 kertaa enemmän plakkia*
- Sonicare-nestetoiminto
- Suojaa ikeniä painetunnistimen avulla

Kohokohdat

Heitä hyvästit plakille




Sähköhammasharjassa on W-harjaspää. Sen tiiviit harjakset poistavat jopa 5 kertaa enemmän plakkia* ja jättävät koko suun puhtaaksi ja raikkaaksi.

Sonicare-nestetoiminto



Philips Sonicare -hammasharjat puhdistavat hampaat ja ikenet hellävaraisesti mutta tehokkaasti jopa 31 000 harjausliikkeellä. Sonicare-nestetoiminto auttaa harjaksia puhdistamisessa ohjaamalla nestettä syvälle hampaiden väliin ja ienrajaa myöten.

Paineanturi

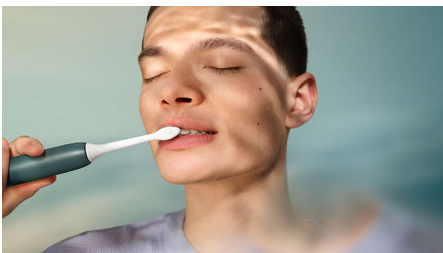

Hampaita tulee helposti harjattua liian kovaa. Siksi tässä Philips Sonicare -sähköhammasharjassa on älykäs anturi, joka

havaitsee, jos painat liikaa. Hellävarainen värinä ilmoittaa, kun on aika hellittää otetta, ja auttaa samalla suojaamaan ikeniäsi.

Harjaustilat ja voimakkuudet



Nauti miellyttävästä puhdistuksesta neljän harjausasetuksen avulla. Voit valita hellävaraisen tai puhdistustilan ja toisen kahdesta tehoasetuksesta. Kaipaako lisää tehoa vai tavoitteellisempaa harjausta? Onnistuu.

Easy-start



Sonicare easy-start -aloitusohjelma on suunniteltu uusille sähköhammasharjan käyttäjille. Ohjelmassa voit totutella harjaukseen asteittaisten ja hellävaraisten harjaustehon lisäysten avulla 14 ensimmäisen harjauskerran aikana.

SmartTimer ja QuadPacer



Sonicaren harjausajastimet huolehtivat, että jokainen harjauskerta on oikean mittainen. BrushPacer kehottaa siirtymään uuteen kohtaan 30 sekunnin välein, ja 2 minuutin jälkeen SmartTimer ilmoittaa, että olet harjannut riittävästi.

Akun käyttöikä



Harjaa säännöllisesti jopa 21 päivän ajan yhdellä latauksella ja nauti entistäkin kätevämmästä harjausrutiinista.

4100

Ladattava sähköhammasharja

HX4042/46

Tekniset tiedot

Tehotasot

Matala: Aristaville ikenille ja hampaille

Tehotasot

M: Päivittäiseen puhdistukseen

Virta

Jännite: 100–240 V

Tekniset tiedot

Paristo: ladattava

Käyttöaika (täydestä tyhjään): 21 päivää

Energiankulutus: Valmiustila ilman näyttöä

<0,5 W (saavutetaan automaattisesti 1

minuutissa)

Akun/pariston tyyppi: Litiumioni

Muotoilu ja pinnoitus

Väri: Vihreä

Huolto

Takuu: 2 vuoden rajoitettu takuu

Helppokäyttöinen

Latauksen ilmaisin: Valaistu kuvake osoittaa akun latauksen

Kahva: Ohut, ergonomisesti muotoiltu laite

Yhteensopiva kahva: Helposti kiinni

napsautettavat harjaspäät

Ajastin: SmarTimer ja QuadPacer

Pakkauksen sisältö

Kahva: 1 4100 ladattava sähköhammasharja

Kuljetuskotelo: 1

Harjaspäät: 2 Optimal White W -harjaspäätä

Laturi: 1

Puhdistusteho

Plakin poisto: Poistaa jopa 5 kertaa enemmän plakkia*

Tilat

Puhdistus: Poikkeuksellisen tehokas päivittäinen puhdistus

Ikenien hyvinvointi: Hieroo hellästi ikeniä

