

PHILIPS



IPL plaukelių šalinimo
prietaisas su „SenseIQ“

Lumea IPL 9900 Series

„SmartSkin“ jutiklis

2 išmanūs priedai: kūnui, veidui

Išskirtinės DI valdomos
programos funkcijos

Naudojamas be laido ir su laidu



BRI950/01

Mūsų protingiausias IPL su išskirtinėmis „Skin AI“ funkcijomis

18 mėn. mėgautės glotnia oda be plaukelių*

Atraskite mūsų išmaniausią IPL sprendimą ilgai išliekančiai lygiai odai. Mūsų greičiausias akumuliatorinis „Lumea IPL“ įrenginys su „SenseIQ“ technologija dabar turi išskirtines „Skin AI“ funkcijas „Lumea IPL“ programėlėje, kad galėtumėte analizuoti savo odą ir stebėti pažangą.

Švelnus ir veiksmingas ilgai išliekančiai lygiai odai

- Greitas rezultatas atliekant procedūras vos kas 2 savaites
- Kad būtų patogiau, galima naudoti su laidu ir be jo
- Sukurta kartu su dermatologais, kad būtų lengva ir veiksminga

Visapusiškas sprendimas veidui ir kūnui

- Visapusiškas sprendimas veidui ir kūnui su 2 išmaniaisiais priedais
- Tinka daugumai odos ir plaukų atspalvių

Individuali IPL plaukų šalinimo procedūra


- Švelnus ir patogus su „SenseIQ“
- Išmanioji kūno plaukų analizė su „SkinAI“

Lumea IPL 9900 Series

IPL plaukelių šalinimo prietaisai su „SenseIQ“

Ypatybės

Norėdami gauti greitų rezultatų, naudokite 2 kartus per mėnesį

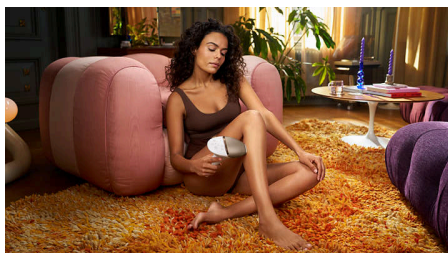


Iš pradžių atlikite tik 4 procedūras kas 2 savaites – dvigubai mažiau nei kitų gamintojų prietaisais. Paskui reikia kartoti procedūrą kas mėnesį, kad plaukeliai neataugtų.

„SenseIQ“ technologija



„Lumea 9900“ serija turi penkis lengvai reguliuojamus šviesos nustatymus. Mūsų „SmartSkin“ jutiklis nuskaitys jūsų odos atspalvį ir padeda rasti patogiausią nustatymą. Išmanieji priedai pritaiko procedūrą kiekvienai kūno vietai.

For convenience with corded and cordless options

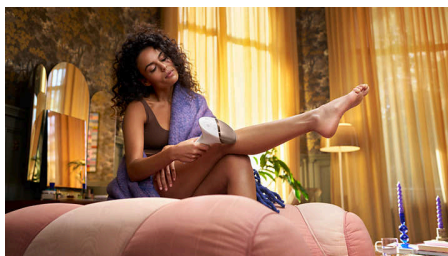

„Philips Lumea“ sukurtas taip, kad jį naudoti būtų patogiu ir lengvu. Naudokite prietaisą su laidu, kad greitai atliktumėte procedūras didelėse kūno

srityse, pvz., kojų, arba atjunkite laidą ir naudokite baterijos režimą, kad tiksliai atliktumėte procedūras sunkiai pasiekiamose kūno srityse.

2 išmanieji priedai



Specialiai sukurti priedai puikiai priglundą prie kūno linkių ir sujungti paleidžia efektyviausias programas kiekvienai kūno sričiai. Veidas: plokščia konstrukcija ir mažas langelis su UV filtru. Kūnas: išlenktas į vidų su dideliu langeliu.


Sukurta padedant dermatologams



Būdama sveikatos technologijų lyderė ir konsultuodamasi su dermatologais, „Philips“ sukūrė „Lumea IPL“, kad būtų lengva ir veiksminga saugiai naudoti jūsų namuose. Profesionaliuose salonuose naudojamos technologijos sukurtas „Lumea IPL“ siūlo švelnų gydymą net jautriose vietose.

BRI950/01

Išskirtinės „SkinAI“ funkcijos

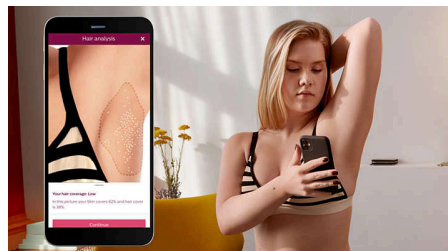

Mūsų nemokama instruktavimo programėlė siūlo nuoseklias gaires dabar su išskirtine „SkinAI“ technologija, skirta analizuoti jūsų kūno plaukams ir stebėti plaukų šalinimą.

Daugeliui odos ir plaukų tipų



IPL reikia kontrasto tarp plaukų spalvos pigmento ir odos tono pigmento, todėl veikia natūraliai tamsiai šviesiais, rudais ir juodais plaukais bei odos atspalviais nuo šviesaus iki tamsaus (I–V).

Specifikacijos

Techninės priedų specifikacijos

Priedas kūno procedūroms: Forma: išgaubtas, Langelio dydis: 4,1 cm², Kūnui pritaikyta procedūra: kojoms, rankoms ir pilvui

Priedas veido procedūroms: Forma: plokščias, Langelio dydis: 2 cm², papildomas filtras, Veidui pritaikyta procedūra: viršutinei lūpai, smakrui ir žandikauliui

Saugūs ir reguliuojami nustatymai

Integruotas UV filtras: Apsaugo odą nuo UV spindulių

5 šviesos energijos nustatymai: Pritaikoma prie jūsų odos tipo

Integruota saugumo sistema: Apsaugo nuo netyčinių blyksnių

Odos atspalvio jutiklis: Nustato jūsų odos

atspalvį

„SmartSkin“ jutiklis: Tinkamo nustatymo indikacija pagal pareikalavimą

Naudojimo režimas

Slinkimo ir blyksnių režimas: Greitam naudojimui

Perkėlimo ir blyksnių režimas: Procedūroms mažame plote

Naudojamas su laidu ir be laido: Naudojamas be laido ir su laidu

Techniniai duomenys

Įtampa: 100–240 V

Baterijos tipas: Įkraunama baterija

Aukštų charakteristikų lempa: Sukurtas taip, kad tarnautų, 450 000 blyksnių, atitinkančių 39 lempos tarnavimo metus****

Techninė priežiūra

Garantija: 2 metų pasaulinė garantija ir 1 metų papildoma garantija užregistravus gaminį internetu per 90 dienų

Pridėti priedai

Naudojimo instrukcijos: Vartotojo vadovas

Laikymas: Prabangus krepšys

Adapteris: 19,5 V / 4000 mA

Procedūros laikas

Apatinė kojos dalis: 8,5 min.

Pažastys: 2,5 min.

Bikinio linija: 2 min.

Veido sritys: 1,5 min.



* Pradedama po 3 procedūrų. Plaukuotumo sumažėjimas po 18 mėnesių: 86 % ant blauzdų, 70 % bikini srityje, 67 % pažastyse.

** Laikantis procedūrų plano. Paskaičiuota, kai naudojama blauzdoms, bikini sričiai, pažastims ir veidui. Lempos veikimo laikas nepratęsia 2 metų visame pasaulyje galiojančios „Philips“ garantijos