

PHILIPS



Refurbished IPL-
ontharingsapparaat

Lumea IPL 9000 Series

SmartSkin-sensor

3 intelligente opzetstukken:
lichaam, gezicht, precisie

Lumea IPL-app

Zowel met als zonder snoer te
gebruiken



BRI955/01R1

Snoerloos gemak, persoonlijke behandeling met SenseIQ

Geniet 18 maanden lang van een haarloze, gladde huid*

Geniet van probleemloze persoonlijke behandeling met de snoerloze versie van ons snelste Lumea-apparaat. SenseIQ-technologie met slimme opzetstukken en begeleiding in de Lumea IPL-app voor langdurig gladde huid.

Zacht en effectief voor een langdurig gladde huid

- Behandel slechts 2x per maand voor snelle resultaten
- Voor het gemak met of zonder snoer te gebruiken
- Ontwikkeld in samenwerking met dermatologen voor gemak en effectiviteit

Volledige oplossing voor gezicht en lichaam

- Volledige oplossing voor gezicht en lichaam met 3 slimme opzetstukken
- Geschikt voor de meeste huidskleuren en haarkleuren

Gereviseerde Lumea IPL

- Dezelfde resultaten, beter voor het milieu

Gepersonaliseerde IPL ontharingsbehandeling

- Zacht en comfortabel met SenseIQ
- Optimaliseer uw routine met de Philips Lumea IPL-app

Kenmerken

Gereviseerde Lumea IPL



We houden ervan om geretourneerde producten te hergebruiken en ze een tweede leven te geven, omdat de materialen en onderdelen die we gebruiken om ze te maken de grootste CO₂-impact hebben. Door te kiezen voor gereviseerde producten in plaats van gloednieuwe, verminderen we de CO₂-voetafdruk met 78%. ***

2x per maand voor snelle resultaten



Begin om de twee weken — dat is de helft van het aantal behandelingen met andere merken. Gevolgd door slechts één keer per maand een touch-up. Dat is het. Het behandelen van beide onderbenen duurt 8,5 minuten.


SenseIQ technology



Lumea 9000-serie heeft vijf eenvoudig aanpasbare lichtinstellingen. Onze SmartSkin-sensor leest uw huidtint en helpt u de meest

comfortable instelling te vinden. Slimme opzetstukken passen de behandeling aan voor elke lichaamszone.

Voor het gemak met of zonder snoer te gebruiken

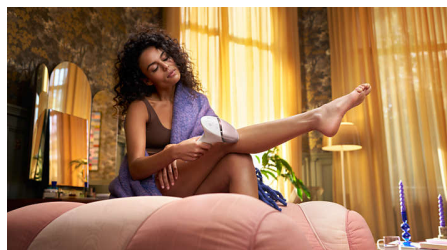

Philips Lumea is ontworpen voor handig en eenvoudig gebruik. Gebruik het apparaat met snoer om grotere lichaamsdelen zoals de benen snel te behandelen. Gebruik het apparaat draadloos met batterijen om moeilijk bereikbare lichaamsdelen nauwkeurig te behandelen.

3 slimme opzetstukken




Speciaal ontworpen opzetstukken passen voor elke curve van uw lichaam en zetten de meest effectieve programma's voor elk lichaamsdeel aan wanneer aangesloten. Gezicht: Plat ontwerp en klein venster met UV-filter. Lichaam: Naar binnen gebogen met groot venster. Precisie: Naar buiten gebogen voor moeilijk bereikbare plaatsen.

Ontwikkeld in samenwerking met dermatologen



Als leider op het gebied van gezondheidstechnologie heeft Philips Lumea IPL ontwikkeld in overleg met dermatologen, voor eenvoudig en effectief gebruik in de veiligheid van uw huis. Lumea IPL is afgeleid van technologie die in professionele salons wordt gebruikt en biedt een zachte behandeling, zelfs op gevoelige gebieden.

Philips Lumea IPL-app

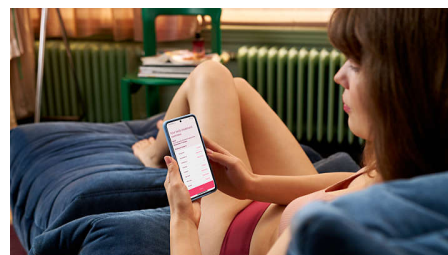

Onze gratis coaching-app helpt u met het plannen en vasthouden van uw behandelschema, en leidt u stapsgewijs door iedere sessie. Door meer dan 2,1 miljoen gebruikers gedownload.

Voor de meeste huid- en haartypes



IPL heeft contrast nodig tussen de pigmenten in de haarkleur en de huidtint en werkt daardoor op natuurlijk donkerblond, bruin en zwart haar en op huidtinten van licht tot donkerbruin (I-V).

Specificaties

Technische specificaties hulpstukken

Lichaamsopzetstuk: Vorm: bol gebogen,
Venstergrootte: 4,1 cm², Afgestemde
lichaamsbehandeling: benen, armen en buik

Opzetstuk voor het gezicht: Vorm: plat,
Venstergrootte: 2 cm², extra filter, Afgestemde
behandeling voor het gezicht: bovenlip, kin en
kaaklijn

Precisieopzetstuk: Vorm: hol gebogen,
Venstergrootte: 3 cm², Afgestemde behandeling
voor de bikinilijn en onderarm

Veiligheid en aan te passen standen

Geïntegreerd UV-filter: Beschermst uw huid
tegen UV-straling

5 lichtsterktes: Aanpasbaar aan uw huidtype

Geïntegreerd veiligheidssysteem: Voorkomt dat
het apparaat onopzettelijk pulsen afgeeft

Huidtintsensor: Detecteert uw huidtint

SmartSkin-sensor: De juiste instelling op het
juiste moment

Toepassingsmodus

Glij- en flitsmodus: Voor snelle toepassing

Stap en Flits: Voor behandeling op kleine zones

Met of zonder snoer te gebruiken: Zowel met als
zonder snoer te gebruiken

Technische specificaties

Batterijtype: Oplaadbare batterij

Spanning: 100-240 volt

Lamp met hoge prestaties: Duurzaam, 450.000
pulsen, gelijk aan een levensduur voor de lamp
van 39 jaar**

Service

Garantie: 2 jaar algemene garantie plus 1 jaar
extra garantie bij productregistratie binnen 90
dagen

Meegeleverde artikelen

Instructies voor gebruik: Gebruiksaanwijzing

Opbergen: Luxe etui

Adapter: 19,5 V / 4000 mA

Behandeltijd

Oksels: 2,5 min.

Bikinilijn: 2 min.

Delen van het gezicht: 1,5 min.

Onderbenen: 8,5 min.



* Na 3 behandelingen. Haarvermindering na 18 maanden:
86% op onderbenen, 70% bij bikinilijn, 67% bij oksels

** Bij volgen van het behandelingschema. Berekend voor
gebruik op onderbenen, bikinilijn, oksels en gezicht. De
levensduur van de lamp verlengt de 2 jaar durende
wereldwijde garantie van Philips niet

*** In scope: product, verpakkingsmateriaal en omgekeerde
logistiek van Philips voor retouren van Lumea S9000. Buiten
scope: chemicaliën, energie die nodig is voor opwerking,
inkomend onderdeel en materiaaltransport. Berekening
gebaseerd op ReCiPe2016 en ecoinvent3.6 database, ervan
uitgaande dat alle accessoires, adapter en verpakking
vervangen moeten worden.