

PHILIPS

sonicare



充電式電動歯ブラシ

3100

5 倍の歯垢をやさしく除去

過圧防止センサー

3 段階の強さ設定

イージースタート



HX4032/81

歯と歯ぐきを健康に保つためのケア

約 5 倍の歯垢をやさしく除去*

フィリップスソニッケアー 3000 シリーズなら、電動歯ブラシへの切り替えもスムーズ。手磨きと比べて最大 5 倍の歯垢除去力で、毎日のケアをより効果的に。

ブラッシングをより手軽に

- 電動歯ブラシへのスムーズな切り替え
- 理想的なブラッシング体験へ
- ガイドに合わせてブラッシング

ライフスタイルに合った設計

- 14 日間のバッテリー持続時間

ソニッケアーの卓越した使い心地

- 約 5 倍の歯垢をやさしく除去*
- ソニッケアーフルイドアクション
- 押しつけ過ぎを伝える過圧防止センサー

3100

充電式電動歯ブラシ

HX4032/81

特長

歯垢をしっかり除去




この電動歯ブラシには、W ブラシヘッドが付属しています。密集した毛先が、歯垢を最大 5 倍多く除去し*、口内全体を爽快にクリーニングします。
* 手磨きとの比較

ソニックケアフルイドアクション



フィリップスのソニックケア歯ブラシは、31,000 ストロークのブラシ振動で歯と歯ぐきをやさしくかつ効果的にキレイにします。また、ソニックケアフルイドアクションにより歯間と歯肉縁に深く液体を噴射して、ブラッシングをサポートします。

過圧防止センサー

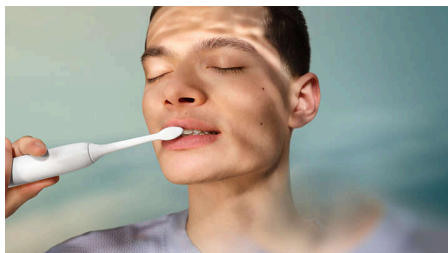

歯を磨くときは歯ブラシを強く押し当ててしまいがちですが、フィリップスソニックケア歯ブラシにはスマート光学式センサーが搭載されており、強

すぎるブラシ圧を検出すると振動でお知らせします。振動を感じたら力を抜くようにすれば、歯ぐきを傷めずに済みます。

強度設定




3 段階の強さで快適にブラッシングできます。高、中、低からお選びください。もう少し強く磨きたい場合や自分に合った磨き方をしたい場合に役立ちます。

イージースタート



電動歯ブラシが初めての方でも安心して使えるように設計されたイージースタートプログラム。使いはじめてから 14 回目にかけて徐々にパワーを上げていきます。

スマートタイマー&カドペーサー

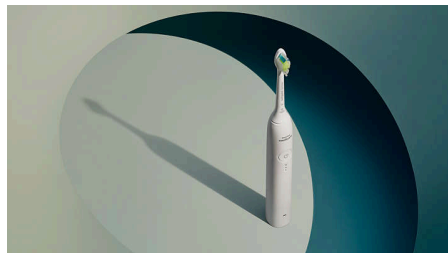

ペーサー & スマートタイマー機能でブラッシング時間をより効率的に。ペーサー機能は、30 秒ごとのブラッシングの区切りをお知らせし、別の部位へ移るように示し、2 分間後にスマートタイマー機能がブラッシングの完了をお知らせします。

使用時間



1 回の充電で最大 14 日間の定期的なブラッシングが可能**。歯みがきの習慣をもっと手軽に身につけられます。**目安として 2 分間のブラッシングを 1 日 2 回使用した場合

3100

充電式電動歯ブラシ

HX4032/81

仕様

強さ

強: ブラッシングを強化
弱: 敏感な歯と歯ぐき用

強さ

中: 毎日の歯みがきに

電源

対応電圧: 100-240 V

仕様

使用時間: 14 日間

バッテリー: 充電式

バッテリーの種類: リチウムイオンバッテリー

エネルギー消費: スタンバイ (ディスプレイオフ)

<0.5 W (1 分以内に自動的に移行)

デザインと仕上げ

色: ホワイト

サービス

本体保証: 2年間保証

使いやすさ

ハンドル: スリムなデザイン

充電表示ランプ: ランプでバッテリー残量を表示

ブラシヘッド装着方式: 簡単にはめ込みできるブラ
シヘッド

タイマー: スマートタイマーとカドペーサー

内容・付属品

ハンドル: 3100 充電式電動歯ブラシ 1 本

ブラシヘッド: W ホワイトプラス 1 本, C2 クリー
ンプラス 1 本

充電器: 1

洗浄性能

歯垢の除去: 最大 5 倍の歯垢を除去*

モード

クリーン: 歯をキレイに

* 手磨きと比較

株式会社フィリップス・ジャパン
© 2025 Koninklijke Philips N.V.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。
記載されている製品名などの固有名詞は、Koninklijke Philips
N.V.またはその他の会社の商標または登録商標です。



Philips Japan, Ltd.

発行日 2025-12-12
バージョン: 1.1.1

EAN: 87 20689 05088 3

www.philips.com