

PHILIPS



Épilateur à lumière pulsée
IPL reconditionné

Lumea IPL 9000 Series

Capteur SmartSkin

3 accessoires intelligents : corps,
visage, précision

Application Lumea IPL

Fonctionne sans fil et sur secteur



BRI955/01R1

Utilisation sans fil facile, séance personnalisée avec SenseIQ

Profitez d'une peau lisse pendant 18 mois*

Profitez d'une séance personnalisée et sans effort avec la version sans fil de notre appareil à lumière pulsée intense Lumea le plus rapide. Technologie SenseIQ avec accessoires intelligents et conseils dans l'application Lumea IPL pour une peau lisse pendant longtemps.

Doux et efficace pour une peau lisse pendant longtemps

- Obtenez des résultats rapides avec seulement 2 séances par mois
- Avec ou sans fil pour plus de commodité
- Développé en collaboration avec des dermatologues pour assurer simplicité et efficacité

Une solution complète pour le visage et le corps

- Une solution complète pour le visage et le corps avec 3 accessoires intelligents
- Convient à la plupart des types de peau et de poils

Épilateur à lumière pulsée Lumea reconditionné

- Mêmes résultats, meilleur pour l'environnement

Épilation personnalisée à lumière pulsée

- Douceur et confort avec la technologie SenseIQ
- Optimisez votre routine de soins avec l'application Philips Lumea IPL


Lumea IPL 9000 Series

Épilateur à lumière pulsée IPL reconditionné

BRI955/01R1


Points forts

Épilateur à lumière pulsée Lumea reconditionné

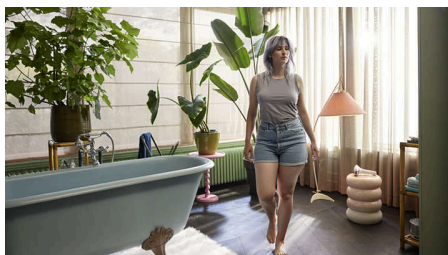

Nous avons à cœur de recycler les produits retournés et de leur donner une seconde vie, car les matériaux et les pièces que nous utilisons pour les produire ont un impact considérable en termes de CO2. Faire le choix d'un appareil reconditionné plutôt que neuf réduit l'empreinte carbone de 78 %***.

Des résultats rapides avec 2 séances par mois

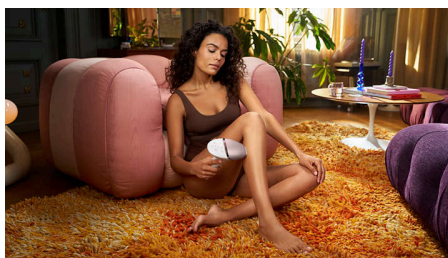


Commencer avec un traitement toutes les 2 semaines, ce qui représente la moitié du nombre de traitements nécessaires pour les autres marques, suivi de retouches une fois par mois seulement. C'est tout. S'occuper des deux demi-jambes prend 8 minutes et 30 secondes.

Technologie SenseIQ



L'épilateur Lumea Série 9000 offre cinq niveaux d'intensité lumineuse faciles à régler. Notre capteur SmartSkin détermine votre teint de peau et vous aide à trouver le réglage le plus adapté. Les accessoires intelligents adaptent l'épilation à chaque zone du corps.

Avec ou sans fil pour plus de commodité

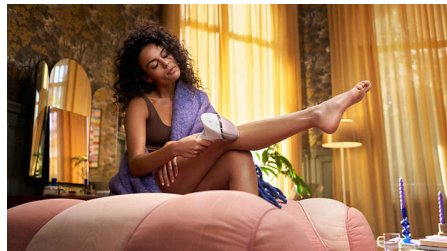

Le Philips Lumea est conçu pour être pratique et facile à utiliser. Utilisez l'appareil branché sur le secteur pour épiler rapidement de grandes zones du corps, comme les jambes. Le mode sans fil sur batterie vous permet d'épiler avec précision les zones difficiles d'accès.

3 accessoires intelligents



Les accessoires spécialement conçus s'adaptent parfaitement aux courbes du corps et déclenchent les programmes les plus efficaces pour chaque partie du corps lorsqu'ils sont connectés. Visage : conception plate et petite fenêtre avec filtre UV. Corps : conception incurvée vers l'intérieur et grande fenêtre. Précision : conception courbée vers l'extérieur pour les zones difficiles d'accès.


Développé en étroite collaboration avec des experts



En tant que leader dans le domaine des technologies de soins de santé, Philips a développé l'épilateur à lumière pulsée Lumea IPL en collaboration avec des dermatologues, de manière à permettre un usage domestique facile et efficace. Dérivé de la technologie utilisée pour

les épilations en instituts, le Lumea IPL permet une épilation douce, même sur les zones sensibles.

Application Philips Lumea IPL

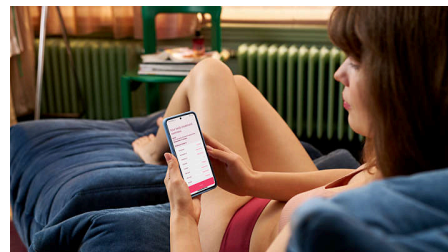

Notre application d'apprentissage gratuite vous aide à organiser et à respecter votre programme de séances, puis vous guide étape par étape à chaque séance. Téléchargée par plus de 2,1 millions d'utilisateurs.

Pour la plupart des types de peau et de poils



La technologie de lumière pulsée nécessite un contraste entre la pigmentation du poil et de la peau. Elle fonctionne donc sur les poils naturellement blond foncé, bruns et noirs et sur les teints de peau clairs à foncés (I-V).

Caractéristiques

Caractéristiques techniques des accessoires

Accessoire corps: Forme : convexe, Taille de la fenêtre : 4,1 cm², Utilisation adaptée au corps : jambes, bras et ventre

Accessoire visage: Forme : plate, Taille de la fenêtre : 2 cm², filtre supplémentaire, Utilisation adaptée au visage : lèvre supérieure, menton et mâchoire

Accessoire de précision: Forme : concave, Taille de la fenêtre : 3 cm², Traitement sur mesure pour les zones du maillot et des aisselles

Sécurité et paramètres réglables

Filtre UV intégré: Protège votre peau des rayons UV

5 réglages d'intensité lumineuse: S'adapte à votre teint de peau

Système de sécurité intégré: Évite les flashes accidentels

Capteur de teint de peau: Détecte votre teint de peau

Capteur SmartSkin: Indication de réglage adaptée à la demande

Mode d'application

Flash Continu & Manuel: Pour une utilisation rapide

Flash & Manuel: Pour une utilisation sur les petites zones

Utilisation avec ou sans fil: Fonctionne sans fil et sur secteur

Spécificités techniques

Tension: 100-240 volt

Type de batterie: Batterie rechargeable

Lampe haute performance: Conçu pour durer, 450 000 flashes, ce qui équivaut à une durée de vie de la lampe de 39 ans**

Entretien

Garantie: Garantie mondiale de 2 ans + 1 année supplémentaire de garantie si vous enregistrez le produit dans les 90 jours après l'achat

Accessoires inclus

Conditions d'utilisation: Mode d'emploi

Rangement: Trousse de rangement

Adaptateur: 19,5 V / 4 000 mA

Durée d'utilisation

Aisselles: 2,5 min

Maillot: 2 min

Parties du visage: 1,5 min

Demi-jambes: 8,5 min



* Au bout de 3 séances. Réduction moyenne de la pilosité après 18 séances : 86 % sur les demi-jambes, 70 % sur le maillot, 67 % sur les aisselles

** En suivant le suivi du programme de séances recommandé. Calculée pour une utilisation sur les demi-jambes, le maillot, les aisselles et le visage. La durée de vie de la lampe ne prolonge pas la garantie mondiale de 2 ans de Philips

*** Sont pris en compte : le produit, les matériaux d'emballage et la logistique inverse de Philips pour les retours Lumea S9000. Non pris en compte : les produits chimiques, l'énergie nécessaire au retraitement, le transport des pièces entrantes et des matériaux. Calcul réalisé grâce à la méthode ReCiPe2016 et à la base de données ecoinvent3.6, sur la base du remplacement de tous les accessoires, adaptateurs et emballages.