

PHILIPS

sonicare

Periuță de dinți
reîncărcabilă

Series 6500

Elimină până la de 10 de ori mai
multă placă bacteriană*

Curățare delicată pentru gingii și
dinți sensibili

Tehnologie Sonicare de ultimă
generație

Senzor vizual de presiune



HX7411/10

Curățare delicată pentru gingiile și dinții sensibili

Elimină delicat până la de 10 de ori mai multă placă bacteriană*

Curățarea temeinică poate fi blândă cu dinții și gingiile sensibile, cu o îndepărtare de 10 ori mai mare a plăcii bacteriene*. Dispune de tehnologia Sonicare de ultimă generație pentru o curățare puternică, dar delicată, chiar și în zonele greu accesibile.

Periere fără efort

- Alege o experiență ideală de curățare
- Sesiuni de periere ghidate
- Informații despre periere la îndemână
- Continuă să te periezi cât mai bine cu memento-ul de înlocuire a capului de periere

Concepută pentru stilul tău de viață

- la cu tine îngrijirea, oriunde
- 21 de zile de periaj regulat

Simte grija oferită de Sonicare

- Extra delicată cu dinții sensibili
- Tehnologie Sonicare de ultimă generație
- Ajută la protejarea gingiilor cu senzorul nostru de presiune


Series 6500

Periuță de dinți reîncărcabilă

HX7411/10


Repere

Extra îngrijire pentru dinți sensibili

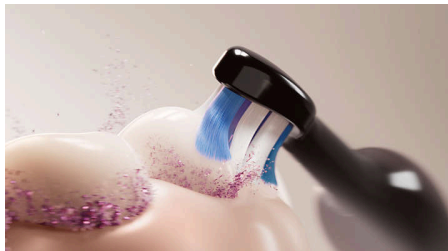


Curățarea temeinică poate fi blândă cu dinții și gingiile sensibile. Acest cap de periere S2 Sensitive are un design unic cu peri lungi, subțiri și ultra-moi, care asigură un periaj blând. Cu peste 3.000 de peri dispuși des, te ajută să îndepărtezi de până la 10 ori mai multă placă bacteriană decât o periută manuală.*

Tehnologie Sonicare de ultimă generație

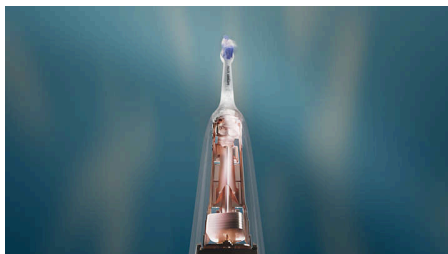

Această periută electrică folosește tehnologia Sonicare de ultimă generație pentru o curățare uniformă în întreaga gură. Motorul ajustează automat puterea, menținând performanța chiar și în zonele greu accesibile. Bucură-te de o curățare delicată, dar eficientă pentru dinți și gingii, cu până la 62.000 de mișcări ale perilor. Acțiunea fluidă Sonicare ajută la curățare, împingând lichidul adânc între dinți și de-a lungul gingiilor.

Senzor vizual de presiune

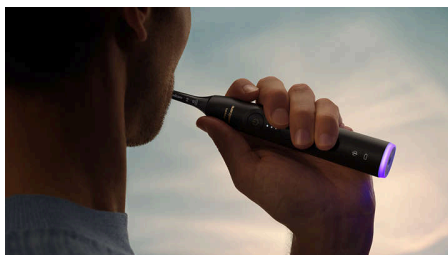


Această periută de dinți electrică Sonicare are la bază un inel luminos care îți permite să știi dacă exerciți prea multă presiune. Nu trebuie decât să o reduci atunci când se aprinde pentru ca gingiile tale să rămână protejate.

Moduri și intensități



Oferă un plus de eficiență periajului tău cu 9 setări diferite. Indiferent dacă îți dorești un periaj mai intens sau orientat spre o nevoie anume, ai opțiuni multiple. Alege între modurile Clean, Sensitive și White. Selectează unul dintre cele trei niveluri de intensitate.

Aplicația Philips Sonicare

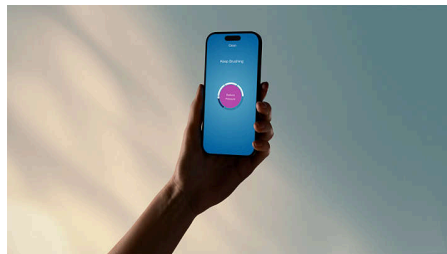

Atinge-ți obiectivele de îngrijire orală cu periută și aplicația Sonicare. Cele două se conectează perfect pentru a-ți oferi sesiuni de periaj ghidate, sfaturi utile și conținut personalizat. Împreună, sunteți de neoprit.

Toc de transport cu funcție de încărcare



Tocul nostru de transport cu port de încărcare integrat îți permite să îți încarci dispozitivul în timp ce ești în deplasare. Este suficient de puternic pentru a ține periută de dinți Sonicare în siguranță și suficient de compact pentru a încăpea în orice geantă, ceea ce îl face partenerul perfect de călătorie.

SmartTimer și BrushPacer



Contorizează-ți timpul sesiunii cu cronometrele de curățare Sonicare. La fiecare 20 secunde, BrushPacer te îți va solicita să cureți o zonă nouă. După 2 minute, SmartTimer va indica încheierea sesiunii.

Atenționare de înlocuire



Știi că, după trei luni, capetele de periere devin mai puțin eficiente? Specialiștii dentari recomandă schimbarea regulată a capului de periere, de aceea periutele de dinți Philips Sonicare au un memento pentru înlocuirea capului de periere. Acesta urmărește cât de des și cât de intens periezi, apoi îți reamintește să înlocuiești capul de periere când este timpul pentru unul nou.

Durată de viață a bateriei de 21 de zile



Beneficiezi de până la 21 zile de periaj regulat la o singură încărcare, aducând un nou nivel de confort rutinei tale zilnice.

Series 6500

Periuță de dinți reîncărcabilă

HX7411/10

Specificații

Niveluri de intensitate

Ridicată: Pentru a îmbunătăți curățarea

Medie: Pentru o curățare zilnică

Redusă: Pentru dinți și gingii sensibile

Actualizare produs

Perioada de asistență: Philips va furniza actualizările de securitate necesare până la 31 decembrie 2026.

Alimentare

Tensiune: 100-240 V

Specificații tehnice

Durată de funcționare (de la Maxim la

Descărcat): 21 de zile

Baterie: Reîncărcabilă

Consum de energie: Standby fără afișaj 0,08 W

Tip baterie: Litiu ION

Design și finisaj

Culoare: Negru

Service

Garanție: 2 ani garanție limitată

Compatibilitate

Compatibilitate cu Android: Telefoane Android cu Bluetooth 4.0 sau o versiune superioară

Tehnologie wireless Bluetooth: Aplicația

Connected brushing

Compatibilitate iOS: iPhone cu Bluetooth 4.0 și superior

Ușor de utilizat

Mâner: Design ergonomic subțire

Compatibilitate cu mânerul: Capete de periere cu aplicare rapidă

Indicator baterie: Pictograma iluminată indică durata de viață a bateriei

Toc de transport: Toc de transport cu funcție de încărcare

Cronometru: BrushPacer și SmartTimer

Articole incluse

Mâner: 1 periuță de dinți reîncărcabilă 6500

Toc de transport: 1 toc de transport

Cap de periere: 1 cap S2 Sensitive

Încărcător: 1 încărcător USB-A

Performanță de curățare

Îndepărtarea plăcii bacteriene: 1000% mai eficient*

Viteză: 62.000 de mișcări de periere/min

Moduri

Clean: Pentru o curățare zilnică impecabilă

Alb: Pentru îndepărtarea petelor de suprafață

Sensitive: Pentru dinți și gingii sensibile

Tehnologie cu senzori inteligenți

Feedback privind presiunea: Inelul cu lumină luminează violet, Vibrație și sunet de pulsație

Atenționare de înlocuire: BrushSync te anunță când este momentul să înlocuiești capul de periere

Aplicația Sonicare

Urmărire și rapoarte de progres: Monitorizează tiparele de periere în timp, ajutându-te să menții igiena orală.

