

PHILIPS

sonicare



Laetav hambahari

3100

Eemaldab õrnalt 5x rohkem
hambakattu

Surveandur

Kolm intensiivsust

Easy Start programm



HX4033/27

Essential Care tervetele hammastele ja igemetele

Eemaldab õrnalt kuni 5x rohkem hambakattu*

Saate lihtsalt käsihambaharjalt minna üle Philips Sonicare 3000 seeria elektrilisele hambaharjale. Hambahari eemaldab kuni 5x rohkem hambakattu võrreldes käsihambaharjaga.

Lihtne harjamine

- Elektrilise hambapesu kasutuselevõtt on lihtne
- Valige oma ideaalne puhastuskogemus
- Juhendatud harjamisseansid

Sobib täiuslikult teie eluviisiga

- 14 päeva vastupidav aku

Tundke Sonicare'i hoolitsust

- Eemaldab õrnalt kuni 5x rohkem hambakattu*
- Sonicare Fluid Action
- Aidake kaitsta oma igemeid meie surveanduriga

Esiletõstetud tooted

Jätke hambakatuga hüvasti




Sellel elektrilisel hambaharjal on komplektis meie W harjapea. Harjapea tihedalt paigutatud harjased eemaldavad kuni 5x rohkem hambakattu* ja puhastavad kogu suu.

Sonicare Fluid Action



Philips Sonicare'i hambaharjad puhastavad õrnalt, kuid tõhusalt teie hambaid ja igemeid kuni 31 000 harjaliigutusega. Sonicare Fluid Action toetab puhastamist, juhtides vedeliku hammaste vahele ja mööda igemejoont.

Aidake kaitsta oma igemeid meie surveanduriga

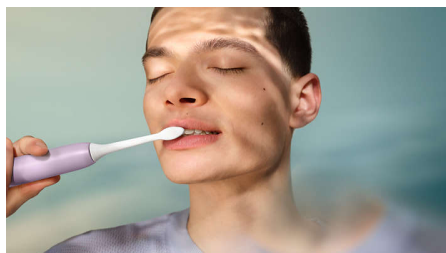

Liiga tugevalt on väga lihtne harjata, seega on Philips Sonicare'i hambaharjal surveandur, mis tuvastab liigse surve. Kui harjate liiga tugevalt, annab see teile õrna vibratsiooniga märku, et harjaksite oma igemete kaitsmiseks õrnemalt.

Intensiivsuse seadistused



Nautige puhastamist, valides 3 intensiivsuse seadistuse vahel. Olenemata sellest, kas soovite jõulisemat või spetsiifilisemat puhastust, kõik on võimalik. Valige intensiivsuste Hight, Medium ja Low vahel.

Easy Start programm



Sonicare'i easy-start-programm on mõeldud inimestele, kes alles alustavad elektrilise hambaharja kasutamist. Programm annab võimaluse esimese 14 kasutuskorra käigus harjamisjõudu õrnalt suurendada.

SmartTimer & QuadPacer



Saavutage parim harjamise aeg Sonicare'i puhastustaimeritega. Iga 30 sekundi järel annab BrushPacer märku uue ala puhastamiseks. Pärast kahte minutit annab SmartTimer märku, et teie seanss on lõppenud.

Aku tööiga



Ühe täislaadimisega saate hambaid regulaarselt harjata kuni 14 päeva, mis muudab igapäevarutiini mugavamaks.

3100

Laetav hambahari

HX4033/27

Spetsifikatsioon

Intensiivsusi

Kõrge: Võimsama puhastamise jaoks

Madal: Tundlikele hammastele ja igemetele

Intensiivsusi

Keskmine: Igapäevaseks puhastamiseks

Võimsus

Pinge: 100–240 V

Tehnilised andmed

Aku: Laetav

Kasutamisaeg (täislaetust kuni tühjani): 14 päeva

Energiatarbimine: Ooterežiim ilma ekraanita

<0,5 W (automaatselt 1 minuti jooksul)

Aku tüüp: Liitiumioon

Disain ja viimistlus

Värv: Lopsakas lilla

Hooldus

Garantii: Kaheaastane piiratud garantii

Lihtsasti kasutatav

Käepideme ühilduvus: Lihtsa klõpskinnitusega harjapead

Akunäidik: Valgustatud ikoon näitab aku tööiga

Käepide: Peenike, ergonoomiline disain

Taimer: SmartTimer ja QuadPacer

Kaasasolevad tarvikud

Käepide: 1 3100 laetav hambahari

Reisivutlar: 1

Harjapea: 1 Optimal White W

Laadija: 1

Puhastusjõudlus

Katu eemaldamine: Eemaldab kuni 5x rohkem kattu*

Režiimid

Puhastamine: Igapäevaseks tipptasemel puhastamiseks

