

PHILIPS



IPL matiņu likvidēšanas
ierīce ar SenseIQ

Lumea IPL 8000 Series

SmartSkin sensors

1 viedais piederums: ķermenim

Lumea IPL lietotne

Izmantojams ar vadu



BRI940/00

Pielāgots jums ar SenseIQ

Izbaudiet gludu ādu bez matiņiem 18 mēnešus*

Izbaudiet ātru un personaizētu darbību ar mūsu Lumea IPL 8000. sēriju. SenseIQ tehnoloģija ar viedajiem piederumiem un Lumea IPL lietotne ilgstoši gludai ādai.

Maigs un efektīvs process ilgstoši gludas ādas nodrošināšanai

- Ātrs rezultāts, veicot procedūru tikai ik pēc 2 nedēļām
- Radīta kopā ar dermatologiem, lai lietošana būtu ērta un efektīva
- Īpaši garš kabelis papildu brīvībai, lietojot ierīci

Risinājums ķermenim

- Piemērota vairākam ādas un matu toņiem
- Risinājums ķermenim ar 1 viedo piederumu

Personalizēta IPL matiņu likvidēšana

- Saudzējoša un ērta lietošana ar SenseIQ
- Optimizējiet ikdienas procedūras, izmantojot Philips Lumea IPL lietotni

Lumea IPL 8000 Series

IPL matiņu likvidēšanas ierīce ar SenseIQ

BRI940/00

Izceltie produkti

2 reizes mēnesī, lai ātri iegūtu rezultātus



Sāciet ar 4 procedūrām tikai ik pēc 2 nedēļām — uz pusi mazāk procedūru nekā ar citu zīmolu ierīcēm. Lai uzturētu efektu, pēc tam nepieciešama profilakse reizi mēnesī.

SenseIQ tehnoloģija



Ierīcei Lumea 8000 Series ir pieci ērti pielāgojami gaismas iestatījumi. Sensors SmartSkin nosaka ādas toni un palīdz noteikt ērtāko iestatījumu. Viedie uzgaļi pielāgo procedūru katrai ķermeņa zonai atsevišķi.

Īpaši garš kabelis



Ērti izmantojama ierīce, jo tai ir īpaši garš kabelis, kas nodrošina vienkāršu piekļuvi un uzlabotu manevrētspēju.

1 viedais piederums



Īpaši izstrādātais piederums ir ieliekts uz iekšu optimālai saskarei ar ādu, kad tiek apstrādātas plašas zonas, piemēram, kājas. Kad piederums ir pievienots, tiek aktivizēta īpaši pielāgotas programmas darbība.


Radīta kopā ar dermatologiem



Veselības aprūpes tehnoloģiju nozares līderis Philips izstrādāja ierīci Lumea IPL sadarbībā ar dermatologiem, lai ierīci varētu ērti, efektīvi un

droši lietot mājās apstākļos. Ierīce Lumea IPL ir izstrādāta, izmantojot profesionālos salonos izmantoto tehnoloģiju, tādējādi nodrošina saudzējošas procedūras arī jutīgās zonās.

Philips Lumea IPL lietotne

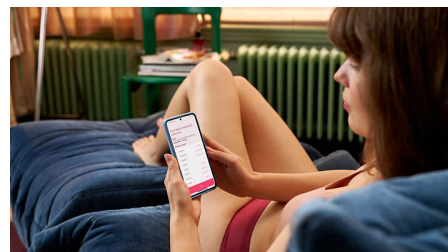

Mūsu bezmaksas apmācības lietotne palīdz plānot un ievērot izmantošanas grafiku, pēc tam sniedz detalizētas norādes par katru sesiju. To lejupielādējuši vairāk nekā 2,1 miljons lietotāju.

Piemērota vairākiem ādas un matu tipu



IPL ierīču darbībai ir nepieciešams kontrasts starp mata pigmentu un ādas toņa pigmentu, tāpēc to var izmantot dabīgi tumši blondiem, brūniem un melniem matiem un uz gaišas līdz tumši brūnas ādas (I-V).

Lumea IPL 8000 Series

IPL matiņu likvidēšanas ierīce ar SenselQ

BRI940/00

Specifikācijas

Piederumu tehniskās specifikācijas

Ķermeņa kopšanas uzgalis: Forma: izliekts uz ārpusi, Laukuma izmērs: 4,1 cm², Ķermenim piemērota procedūra: kājas, rokas un vēders

Drošības un regulējamie iestatījumi

Iebūvēts UV filtrs: Aizsargā ādu pret UV gaismu

5 gaismas enerģijas iestatījumi: Pielāgojiet savam ādas tipam

Iebūvēta drošības sistēma: Sargā no neparedzētiem zibšņiem

Ādas toņa sensors: Nosaka ādas toni

SmartSkin sensors: Atbilstošais iestatījuma norādījums pēc pieprasījuma

Lietošanas režīms

Slīdēšana un apstrāde: Ātrai izmantošanai

"Stamp and Flash" tehnoloģija: Nelielu zonu apstrādei

Lietošana ar vadu / bez vada: Izmantojams ar vadu

Tehniskā specifikācija

Spriegums: 100–240 V

Augstas veiktspējas lampa: Ilgstošai darbībai, 450 000 mirgošanas reizes, kas atbilst 39 gadu lampas kalpošanas laikam**

Serviss

Garantija: 2 gadu garantija visā pasaulē un 1 papildu garantijas gads pēc produkta reģistrācijas 90 dienu laikā

Komplektā iekļautie piederumi

Lietošanas pamācības: Lietotāja rokasgrāmata

Krātuve: Kosmētikas somiņa

Adapteris: 19,5V/4000 mA

Izmantošanas laiks

Paduses: 2,5 min

Bikini zona: 2 min

Apakšstilbi: 8,5 min

