


PHILIPS

Imagerie par
résonance magnétique


Prendre soin de vos antennes, c'est aussi prendre soin de vos patients

Manipulation en toute sécurité

Toujours soulever l'antenne par sa base.

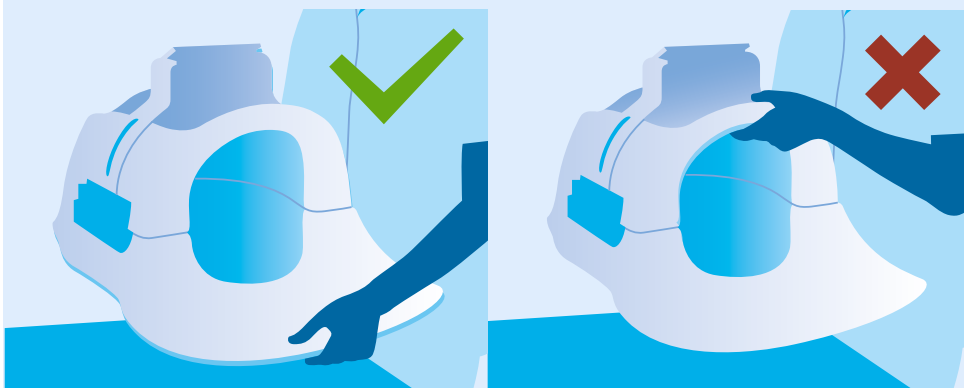


Éviter toute courbure excessive des câbles d'antenne.

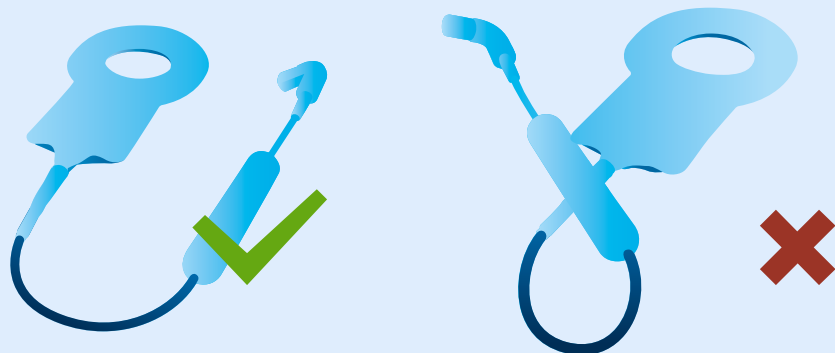

Connexions sûres et sécurisées


Insérer le connecteur à un angle de 90° afin d'éviter tout endommagement.

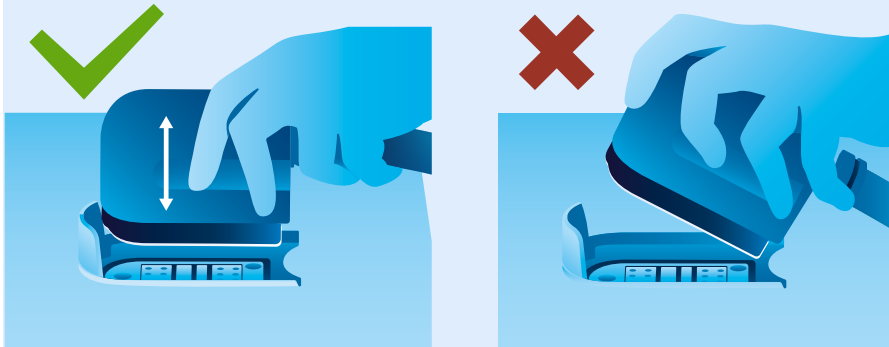

Utiliser les capuchons de protection
des connecteurs.




Ne jamais utiliser d'antenne
dont les câbles
ou les connecteurs
sont endommagés.

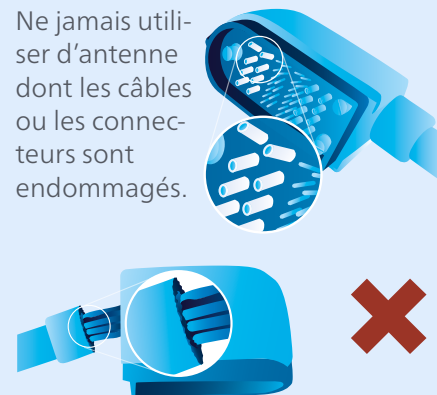

Stockage en toute sécurité

Adopter de bonnes pratiques de rangement des antennes et des câbles.

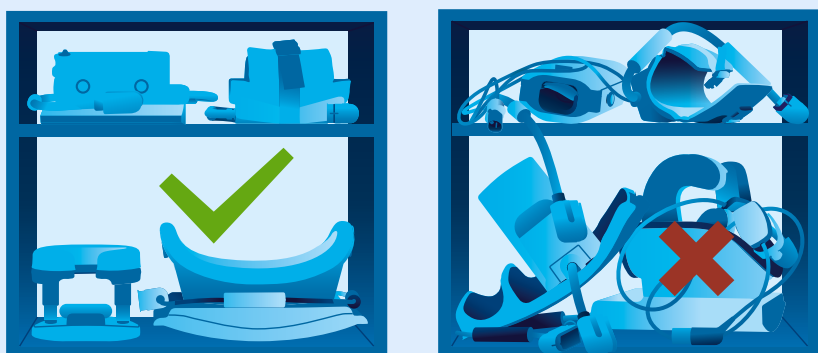

Débrancher les câbles d'antenne lorsque le système n'est pas utilisé.



Après débranchement, ranger correctement les câbles afin d'éviter qu'ils ne pendent ou ne soient mis en tension.

