



PHILIPS

Healthcare

血管造影X線診断装置

Azurion 7

ハイブリッド専用CアームFlexArm

特長書

ハイブリッド専用Cアーム FlexArm

ケーブルレスデザイン




ハイブリッド専用CアームのFlexArmではケーブルをレールに内包したケーブルレスを実現したデザインを採用しています。

アームがどの位置にあっても天井からケーブルが垂れることないため、ケーブルが術野へ侵入したりシーリング関連器具との干渉することなく、さまざまな位置でのアームポジションを実現しています。



柔軟なアームポジション

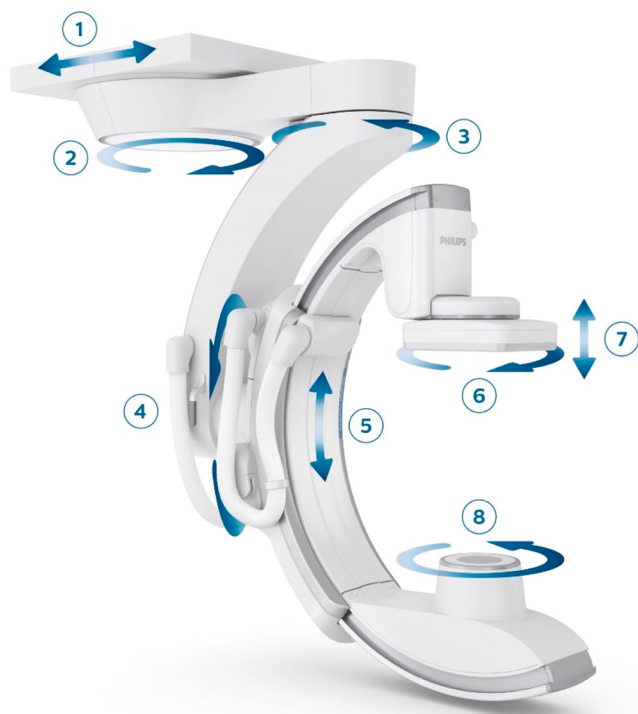

詳細説明はこちらをご覧ください。

横手方向に236 cm、長手方向に最大635 cmの可動範囲を有し、手技中の術者やスタッフの立ち位置に合わせてアームを配置したり部屋の隅に退避しておくことが可能です。

X線が不要の際や不測の事態の際に、術者の後ろに待機する「スタンバイポジション」
X線が不要な外科的手技時には、部屋の隅へ退避する「パーキングポジション」など、術式や術者に合わせて柔軟性の高いアームポジションを実現します。



スタンバイポジション



パーキングポジション

ハイブリッド専用Cアーム FlexArm APC Pathway



APC PathwayはFlexArmの移動経路を事前に登録できる機能です。

完全退避しているパーキングポジションから術野で透視や撮影を行うワーキングポジションまでの経路において想定される麻酔器やモニタといった周辺機器、術者、スタッフの位置を考慮し、最適な経路を事前に登録すると手技時にはその設定された経路をワンボタンでスムーズに移動させることが可能です。

この経路設定はユーザー側で手技毎に登録可能で、手技前の準備から手技の開始時のアーム挿入経路や手技の終了時のアーム退避経路など、日常業務におけるアーム移動の再現性をサポートします。



詳細説明はこちらをご覧ください。

* オプション

選べる他社製手術台



ハイブリッド専用天井走行式アームであるFlexArmでは要望に沿って他社製手術台を組み合わせることも可能です。

他社製手術台ではフルカーボンのフラットな天板と万能天板を選択でき術式に応じて入れ替えることでハイブリッド手術室の適応範囲を拡張させます。



製造販売業者

株式会社フィリップス・ジャパン

〒106-0041 東京都港区麻布台1-3-1
麻布台ヒルズ森JPタワー 15階

お客様窓口 0120-556-494
03-4334-7637

受付時間 9:00～18:00
(土・日・祝祭日・年末年始を除く)

www.philips.co.jp/healthcare

改良などの理由により予告なしに意匠、仕様の一部を変更することがあります。あらかじめご了承ください。詳しくは担当営業、もしくは「お客様窓口」までお問い合わせください。記載されている製品名などの固有名詞は、Koninklijke Philips N.V.またはその他の会社の商標または登録商標です。

販売名：血管造影X線診断装置 Azurion

医療機器認証番号：228ACBZX00012000

設置管理医療機器／特定保守管理医療機器
管理医療機器